



WDM

Precisión & Visión

WDM

Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd.

Address: Building 3 No.9 Jiuxianqiaodong Road, Chaoyang

District,100015,Beijing, P.R.China

Tel: +86-10-84575792/3/5/6

Fax: +86-10-84575794

Web: www.wandong.com.cn

E-mail: International@wandong.com.cn

Note: Design and specification subject to change without notice.



DR

DETECTOR DE PANEL PLANO
SISTEMA DIGITAL DE RADIOGRAFIA

Productos de Serie de DR

SOIUCIÓN DIGITAL

Con 60 años de dedicación en R&D y un entendimiento profundo de las demandas clínicas, Wandong presenta la nueva generación de Familia de DR-NEW ORIENTAL 1000.

El equipo, alberga una combinación sobresaliente del diseño ergonómico y el cuerpo de la máquina elegante, perfeccionando tanto la experimentación como el flujo de trabajo de paciente.

Abundantes configuraciones para la selección – portatubo con suspensión de techo, portatubo con suspensión de piso, estructura de brazo en U, y mesa integrada con portatubo.

- Generador de alto rendimiento de 50/80kW
- FPD grande de 17"x17", fijo, portátil o inalámbrico satisfaciendo diferentes prácticas clínicas
- Control al lado de mesa de pantalla táctil de LCD grande
- Plataforma inteligente de imagen – InvaRay, compatible con toda la serie de productos digitales de WDM (DSA, DRF, DR)
- Stitching automático de imagen (OPCIONAL)
- Conformidad plena de DICOM 3.0



Auto-persecución

El campo de proyección de rayos-x persigue automáticamente al detector con la posición y el ángulo.

Auto-posicionamiento completo

El control auto/Semi-auto/manual se alterna según las demandas.


Posicionamiento a un-clic, auto-posicionamiento a la posición programada dentro de 10s.

Mesa de tablero flotante con ruedas

El diseño único de mesa de tablero flotante con ruedas.

Protección con auto-colisión

Protección doble por sensores infrarrojos y radar.

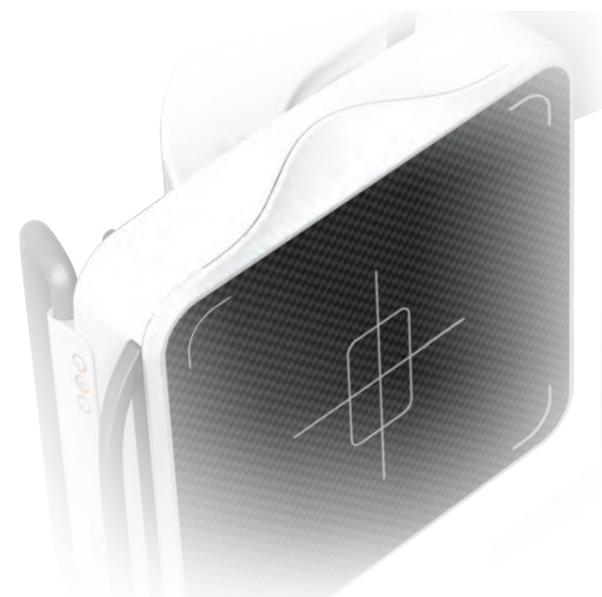

Configuración I

DR automático completo de suspensión en techo

Configuración II




Mesa rodable con estructura de suspensión en techo

- Estructura multifuncional para todas las demandas clínicas
- Alternó de un clic entre la posición decúbico y de pie con bucky
- Auto-persecución entre el tubo de rayos-x y el bucky vertical




Control inteligente al lado de mesa

- Control táctil de pantalla
- Ajuste de exposición de parámetro
- Guía de posición de paciente
- Ajuste de APR
- Display de la última imagen

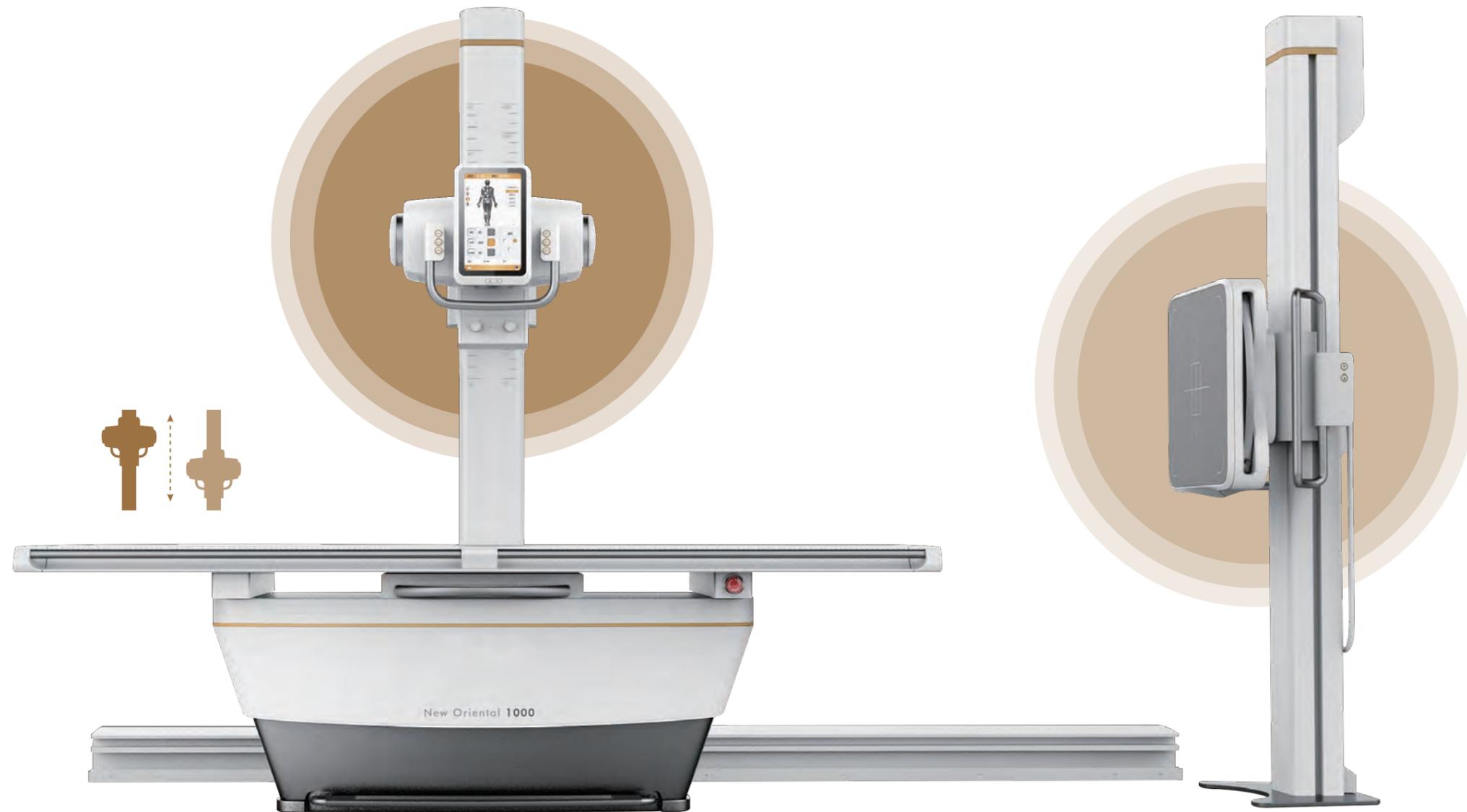

Configuración III

Portatubo con suspensión en piso con mesa de tablero flotante y estativo vertical con bucky

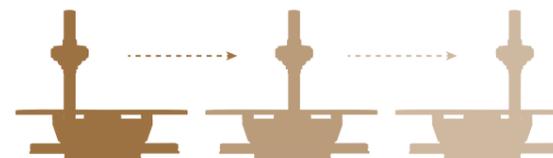


- Portatubo de movimiento motorizado y bucky vertical
- Tubo de rayos-x de persecución al detector vertical mejorando el flujo de trabajo
- Estructura clásica de RAD satisfaciendo todas las demandas clínicas
- Detectores portátiles o fijos para su preferencia
- Mesa elevable (opcional)

Configuración IV

Mesa integrada con tablero flotante con estativo vertical

- La combinación de estructura clásica con el FPD portátil trae alto rendimiento a costo asequible.
- El FPD portátil se alterna entre posicionamiento en decúbito y vertical (ambos con bucky), también se adaptan con pacientes en camilla de emergencia o silla de rueda sin mover los pacientes.

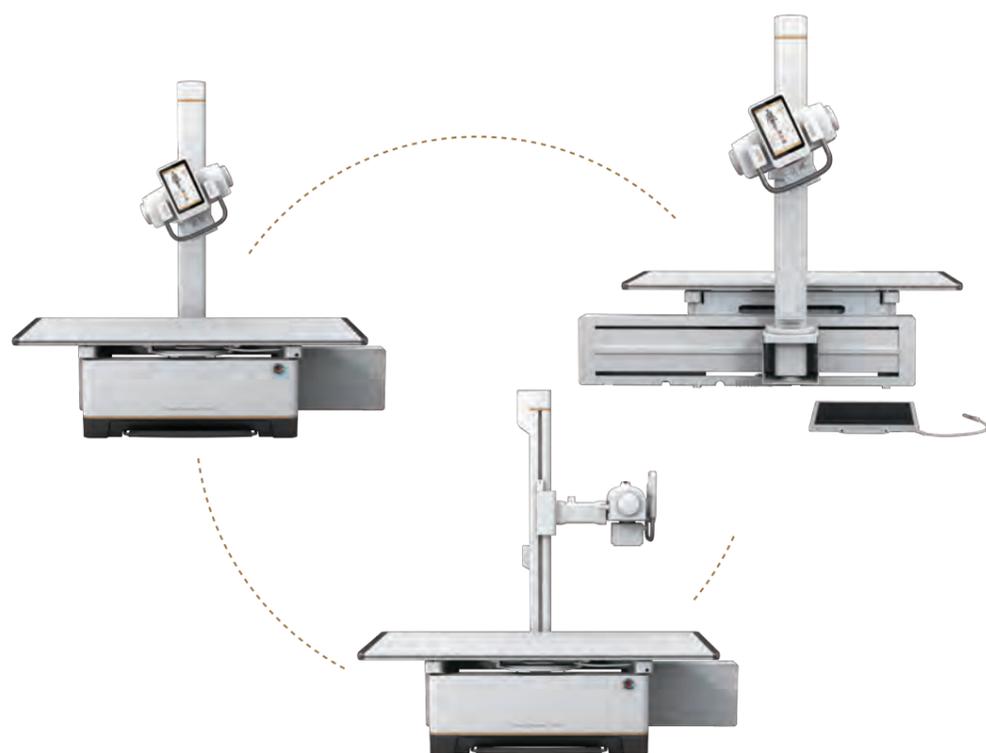

Configuración V

DR de brazo en U motorizado

- Ocupación minimizada de espacio
- Fácil de uso
- Movimientos motorizados en el trayecto vertical, el ajuste de SID y la rotación de brazo se operan simultáneamente
- Estructura simple y práctica satisface la mayoría de las demandas clínicas



Imágenes clínicas exquisitas

